

LAWTON

MEDIZINTECHNIK

Cerrahi aletlerin hazırlığı

- ! - Aletlerin ağızları açık şekilde yıkayın!
- Kireçsiz (saf) su ile yıkayın!
- - Kurulayın!



Cerrahi aletlerin kontrolü


Fiziki ve fonksiyonel kontrol



Aryzalı aletleri ayırınız



Yeni Cerrahi aletler

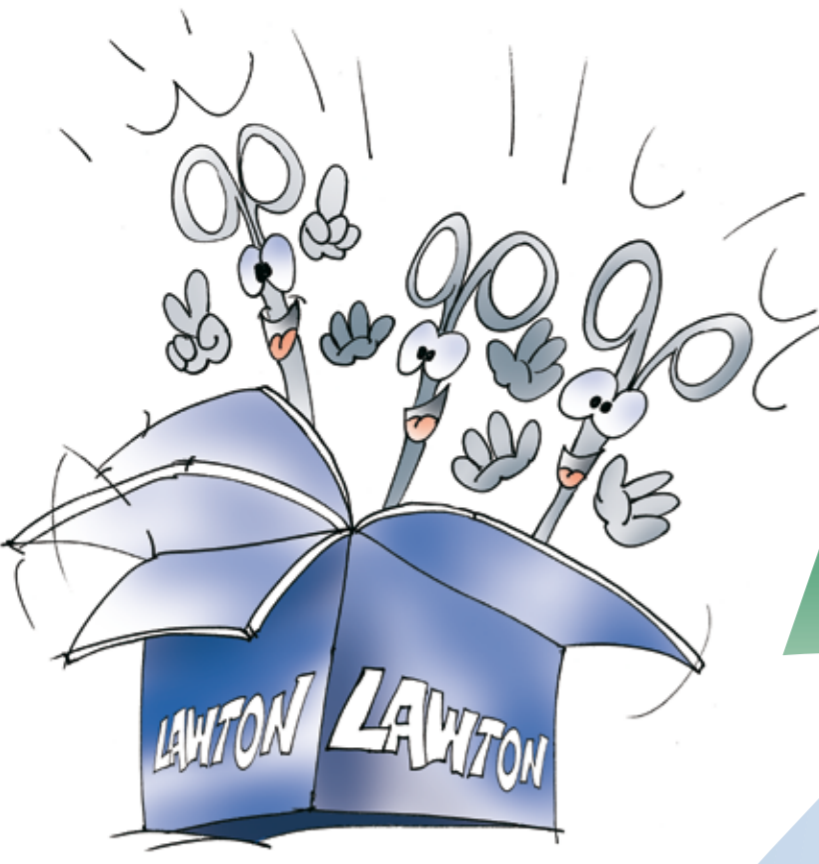


! Arzulanan kullanım!
Cerrahi aletler ıslak veya kuru!



Ameliyathane

Lawton's
**Lucky
Lawrence**

Çeşitlere göre ayırın ve sarın

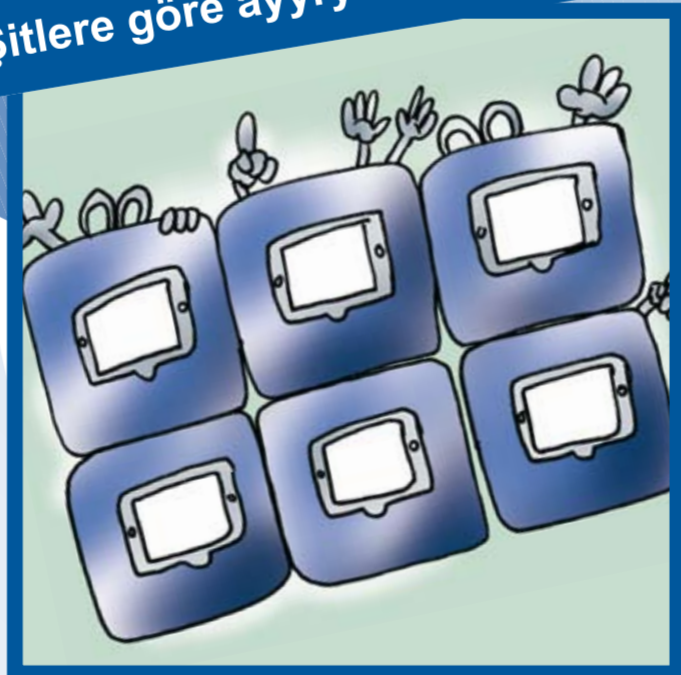

- ! - Aletlerin ağızlarını açık şekilde tutunuz!
- - Tepsileri fazla doldurmayın!

Otoklav (buhar) sterilizasyon



- ! - Kireçsiz (saf) su kullanın!
- $\geq 134^{\circ} C!$
- - Kurallara uyunuz!

Aletlerin 'Kullanım Bröşürünü' bedelsiz olarak isteyiniz.

www.lawton.de

İmalatçınız
LAWTON GmbH & Co. KG
Württembergische Straße 23
78567 Fridingen/Germany
Tel. +49 (0) 7463 9965-0

