




Nye  
instrumenter

## Vedlikehold av instrumenter

- ! - Instrumentene må være „åpne“ under vask!
- Skyll med demineralisert vann!
- Tilstrekkelig tørking!



Operasjonsrom

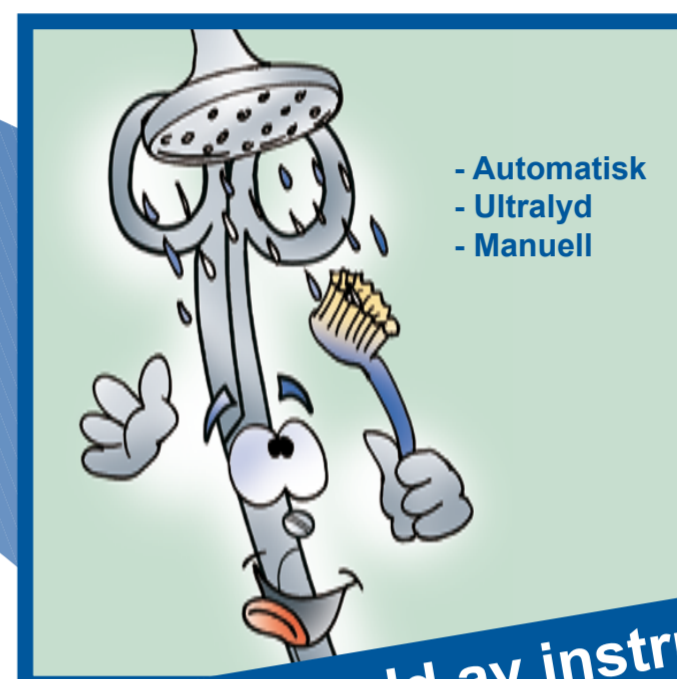

Vedlikehold av instrumenter



Lawton's  
**Lucky  
Lawrence**

Visuell sjekk og funksjonell test



Damp sterilisering

- ! - Bruk kun demineralisert vann!
- $\geq 134^{\circ} C!$
- Respekter normer!



- ! - Spesialinstrumenter behandles separat!

Sorter og pakk



- ! - Åpen sperre!
- Ikke overbelast steriliseringsbrettene!

Defekte  
instrumenter



Bestill gjerne vår  
informasjonsbrosjyre  
om „vedlikehold av  
instrumenter“

[www.lawton.de](http://www.lawton.de)