

LAWTON

MEDIZINTECHNIK

Trattamento dello strumentario

- ! - Pulire lo strumentario con cremagliera!
- Risciacquare con acqua demineralizzata!
- - Asciugare accuratamente!



Pulizia dello strumentario

Controllo visivo e funzionale



! Lubrificare le articolazioni e le superfici d'attrito!

Strumentario difettoso!



Nuovo strumentario



Sala operatoria


Lawton's
**Lucky
Lawrence**

Sterilizzazione a vapore



- ! - Utilizzare solo acqua demineralizzata!
- $\geq 134^{\circ} \text{C}$!
- - Prendere in considerazione le norme!

Selezionare ed imballare

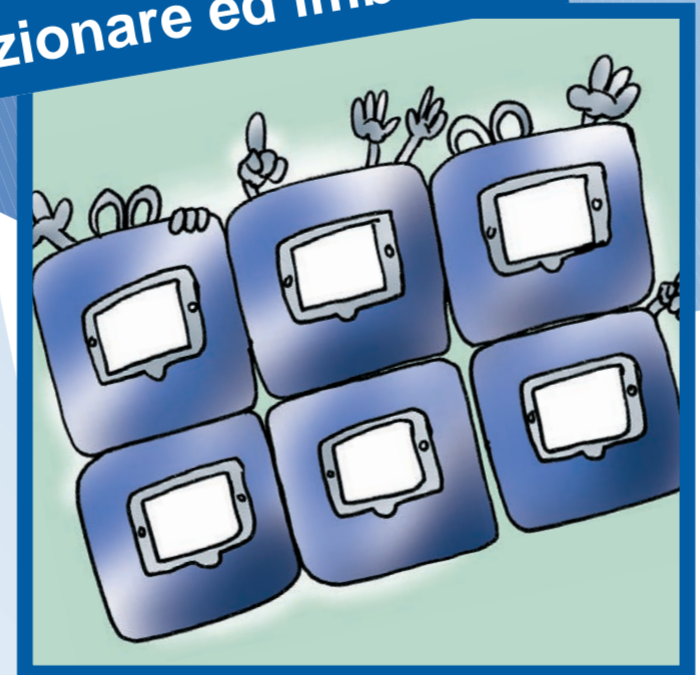

- ! - Aprire lo strumentario con cremagliera!
- Non sovraccaricare i cestelli!

Richiedeci le istruzioni sul „trattamento degli strumenti chirurgici“

www.lawton.de

Il Vs. fabbricante:
LAWTON GmbH & Co. KG
Württembergischer Straße 23
78567 Fridingen/Germany
Tel. +49 (0) 7463 9965-0

